

BRILLIANT

New Line Nano compozit dual universal



Manevrare și Coloristică revoluționară

Sistem unic Dual : două nuanțe într-o singură seringă

Nano tehnologie pentru utilizare universală anterior/posterior

Nano tehnologie elvețiană



BRILLIANT

New Line

Am dus formula noastră la un nivel mai avansat pentru a ține ritmul cu nevoile și cerințele clienților noștri.

Brilliant New Line conține umpluturi nano-sferice îmbunătățite. Acestea asigură o manevrare superioară, rezistență și aplicabilitate excelentă. Rezultatele se văd : obturații excelente pentru toate indicațiile pot fi obținute.

NANO FORMULA ASIGURĂ : PROPRIETĂȚI DE MANEVREARE DE NEEGALAT

- nelipicios – ideal pentru sculptare
- compozit condensabil și sculptabil
- excelent pentru toate clasele(anterior/posterior)
- adaptabil total la baza cavității fără infiltrare
- nu curge pe lângă instrumentul de aplicare
- adaptare marginală excelentă și puncte de contact

SUCCESE CLINICE – UTILIZARE UNIVERSALĂ



Caz anterior

Restaurare cu BRILLIANT New Line Smaltz A2/B2. Modelarea contururilor naturale e posibilă datorită consistenței ferme, nelipicioase. Acestea reduc timpul necesar pentru reconturarea anatomică cu ajutorul instrumentelor de finisat.



Caz posterior

Restaurare cu BRILLIANT New Line Dentină A3/D3.

Conceptul dublei nuanțe

SISTEMUL UNIC DUO SHADE PENTRU SIMPLIFICAREA SELECȚIEI NUANȚEI

Situație zilnică în cabinetul stomatologic



Cheia Vita™ este de obicei baza pentru alegerea culorii. Oricum alegerea culorii corecte poate fi dificilă. Două sau chiar 3 nuanțe pot fi apropiate. Coltène/Whaledent a folosit această informație pentru a dezvolta Conceptul Dublei Nuanțe.



Prin această dezvoltare, am rezolvat cu succes problema selecției ușoare și rapide a culorii, precum și realizarea în același timp a unei game de culori economice.

CELE MAI BUNE PROPRIETĂȚI DE ADAPTARE – EFECTUL CAMELEON

Studii universitare și testele in vivo au confirmat faptul că, în situații clinice, când rămâne suficientă structură dentară, conceptul Brilliant New Line Nuanță dublă va reproduce exact nuanța Vita dorită.

CHEIE DE CULORI UNICĂ

Cheia de culori Brilliant New Line prezintă o selecție a culorii unică. Este bazată pe principiul “miez-carcasă”. Nuanțele de dentină și smalț sunt alese separat. Nuanța finală este imediat evidențiată.


REZULTATE ESTETICE EXCELENTE FĂRĂ EFORT

Pacienții și dentiștii deopotrivă sunt entuziași în legătură cu efectul cameleonic dat de alegerea culorii potrivite de prima dată. Dentistul obține rezultate estetice superioare prin selectarea simplă și rapidă a culorii dată de conceptual Nuanței duble numai cu câteva seringi.

Restaurări clasa a IV VITA™ A2 și B2 cu Brilliant New Line A2/B2

dinte vita
A2

dinte vita
B2

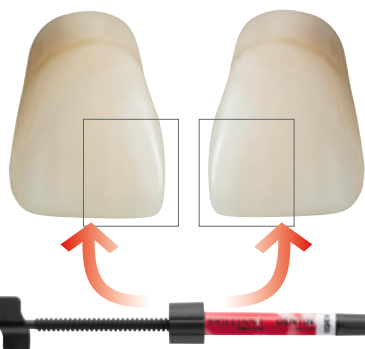

Obturații invizibile utilizând 2 nuanțe într-o singură seringă A2/B2

Nuanța de dentină “miez”: _____

Nuanța de smalț “carcasa” _____

Smalț peste dentină _____

Culoare finală _____

Nano tehnologie

NANO FORMULA ASIGURĂ...

Prin introducerea nano particulelor o distribuție optimă a dimensiunilor particulelor este obținută. Astfel se obține o optimizare a lustruirii, manevrării și o reducere a contracției polimerizării.

...PROPRIETĂȚI DE MANEVRARE SUPERIOARE, CONSISTENȚĂ NELIPICIOASĂ ȘI SCULPTABILĂ


Aplicați compozitul pe un pad de amestec și secționați-l cu ajutorul unui instrument. Dacă materialul "alunecă", o sculptare optimă a formelor anatomice la temperatura intraorală nu este posibilă.




BRILLIANT New Line
Consistență stabilă

...ȘI ÎMBUNĂȚĂȚIREA FINISĂRII CU MINIMUM DE TIMP


Imagine SEM înainte
de finisare

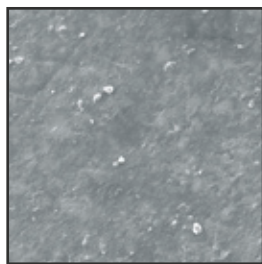


BRILLIANT New Line dovedește valori de strălucire superioare datorită distribuției îmbunătățite a particulelor.

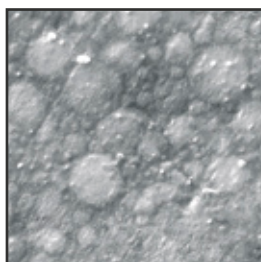

Filtek Z350*

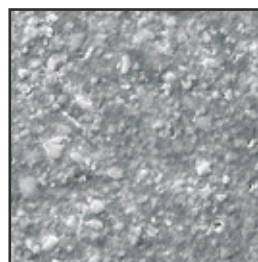

Premise*

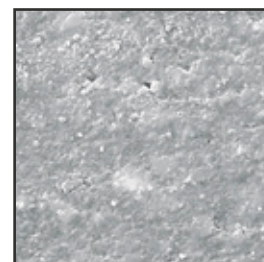

Tetric EvoCeram*

imagine SEM –mag. 1800x (sursă internă)

* nu sunt marcă a Coltène/Whaledent

BRILLIANT FLOW

Noul Brilliant Flow disponibil acum

Noul Brilliant Flow de la Coltène/Whaldent este un compozit fluid nano, radioopac, bazat pe o tehnologie de succes clinic demonstrată.

Pentru a realiza cele mai înalte standarde posibile, Brilliant Flow a fost realizat având o radioopacitate ridicată și o contracție scăzută.

Noul Brilliant Flow asigură proprietăți fluide

optime. Materialul este stabil, curge ușor sub presiune pentru a asigura o manevrare ușoară și o aplicare precisă.

Ajustarea culorii : Ca și Brilliant New Line, Brilliant Flow este bazat pe conceptul Nuanței Duble, asigurând o aplicare ușoară și rapidă. Rezultatele estetice sunt garantate datorită efectului cameleonic excelent.



Imagine preoperatorie



Aplicarea Brilliant Flow



Restaurare Finală

BRILLIANT FLOW

Informații pentru comandă

Brilliant Flow Refill-uri

Conținut : 1 Refill (2.3g/1.25ml)

7100 Dentină A1/B1

7101 Dentină A2/B2

7102 Dentină A3/D3

7103 Dentină A3.5/B3

7104 Dentină A4/M5

7105 Super White

7106 Transparent

8469 Vârfuri aplicatoare 20 bucăți



One Coat **Bond SL** O PICĂTURĂ - O APLICARE

ADEZIV PUTERNIC PENTRU DENTINĂ ȘI SMALȚ



Natura hidrofilică a One Coat Bond SL garantează o bună aplicare la nivelul dintelui și facilitează penetrarea completă la nivelul fibrelor de collagen și a tubilor dentinari.

FĂRĂ SOLVENT – STRAT DE ADEZIV OMOGEN

One Coat Bond SL este compatibil cu apa și nu necesită solvent precum acetona sau etanolul. Prin urmare, One Coat Bond SL exclude apariția sensibilității postoperatorii legată de solvent, în timp ce asigură o compoziție consistentă și omogenă de la prima până la ultima picătură.


SIMPLU

Aplicați o singură picătură pe microbrush, apoi aplicați pe suprafața în prealabil demineralizată printr-o mișcare de frecare. Apoi, fotopolimerizați.

ECONOMIC


Bucurați-vă de aplicarea controlată din sticlă- microbrush- dinte fără dezavantajele dozei unice scumpe și risipitoare. Cu One Coat Bond SL, o mică picătură este ceea ce aveți nevoie. O sută de aplicări per sticlă. Fără evaporare până la ultima aplicare.

goluri formate la nivelul pereților axiali ale cavităților de clasa V

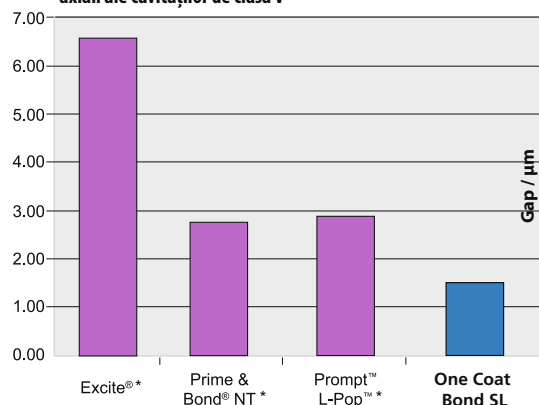


Source: Prof. J. C. Gomes, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, Parana, Brazil

rezistență adezivă la nivelul dentinei

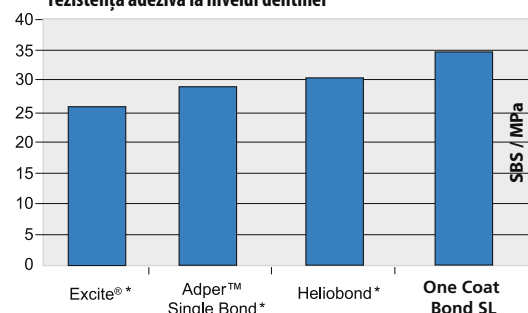

Source: Prof. Marcelo C. Chain, Universidade Federal de Santa Catarina disciplina de Materiais Dentários, Florianópolis, Brazil

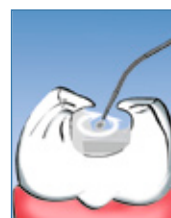

aplicare
20 s



fotopolimerizare
30 s

ETCHANT GEL S

A product of the Coltène® Brilliant Esthetic Line



35 % acid fosforic

APLICARE PRECISĂ

Vârful fin permite aplicarea gelului demineralizant S exact acolo unde aveți nevoie, chiar și în zone greu accesibile.

CONSISTENȚĂ FINĂ

Curge ușor, fără scurgeri.

UȘOR DE ÎNDEPĂRTAT

Clătiți ușor și apariția culorii albastru deschis va da o indicație clară asupra unei clătiri complete.



INFORMAȚII PENTRU COMANDĂ

8950 LA BRILLIANT New Line Intro Kit Seringi

6 Seringi = 12 Culori Vita™

BRILLIANT New Line Dentină:
A1/B1, A2/B2, A3/D3 3 x 4 g

BRILLIANT New Line Smalt:
A1/B1, A2/B2, A3/D3 3 x 4 g

ONE COAT BOND SL 1 x 5 ml
GEL DEMINERALIZANT S 1 x 2.5 ml
Cheie de culori BRILLIANT New Line
Accesorii

REFFIL-URI 1 x 4 g

8951 Dentină A1/B1
8952 Dentină A2/B2
8953 Dentină A3/D3
8954 Dentină A3.5/B3

8960 Smalt A1/B1
8961 Smalt A2/B2
8962 Smalt A3/D3
8963 Smalt A3.5/B3
8964 Smalt C2/C3
8965 Smalt A4/M5
8968 Transparent
8974 Super White

ACCESORII

8990 Cheie de culori
BRILLIANT New Line

7430 One Coat Bond SL (1 x 5 ml)
7634 Microbrush negre (50 buc)
7373 Gel Demineralizant S (2 x 2.5 ml)
7876 Vârfuri aplicatoare 20 buc

www.coltenewhaledent.com
© 2009 Coltène/Whaledent AG

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
info@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info@coltenewhaledent.com

Helios Medical & Dental
Tel. 021 408 71 04

SC Tehnical Dent Srl
Tel. 021 230 33 64

**coltène
whaledent**