

**3M** Science.  
Applied to Life.™



**3M™ Imprint™ 4**  
Material de amprentă VPS

**Mai puține griji  
pentru amprentarea  
de zi cu zi.**

# Amprentele de precizie devin un obicei zilnic.

## Material de amprentă VPS 3M™ Imprint™ 4

Spuneți „DA” materialului de amprentă VPS, cu cel mai scurt timp de priză intraorală. Lucrați pe tot parcursul zilei cu control, precizie și viteză. Amprente perfecte la prima amprentare, cu cel mai rapid material VPS disponibil pe piață. E pur și simplu un mod mai bun de a lua amprente mai bune.

## Control

### Timp de lucru suficient.

Pentru a obține o amprentă precisă este important să beneficiați de suficient timp de lucru. Materialul de amprentă VPS Imprint 4 vă oferă tot timpul de lucru de care aveți nevoie.

Datorită compoziției chimice unice, timpul de priză NU începe înainte ca timpul de lucru să se termine. Prin urmare, veți avea timp suficient pentru a încărca și insera lingura de amprentă - scăpând de stresul cursei contra cronometru.



## Precizie

### Hidrofilie excelentă.

Materialul de amprentă VPS Imprint 4 este extrem de hidrofil, absorbind umiditatea chiar de la început, înainte de așezare. Astfel, materialul poate să reproducă detaliile cu acuratețe chiar și în mediu umed—oferind maximă precizie și încredere.



# Vitează


## Timp mai scurt de amprentare – mai puțin stres pentru pacienți.

Materialul VPS Imprint 4 are cel mai scurt timp de priză intraorală dintre cele mai bune materiale VPS de amprentă cu priză rapidă. Această performanță este posibilă datorită prizei exoterme inovatoare care accelerează timpul de priză.




## Material de amprentă cu priză exotermă autodeclanșată.

Reacția de priză a materialului de amprentă VPS Imprint 4 este accelerată pentru a scurta timpul de priză intraorală. Materialul se încălzește rapid până la temperatura corpului (37°C/98,6°F), crescând confortul pacientului.

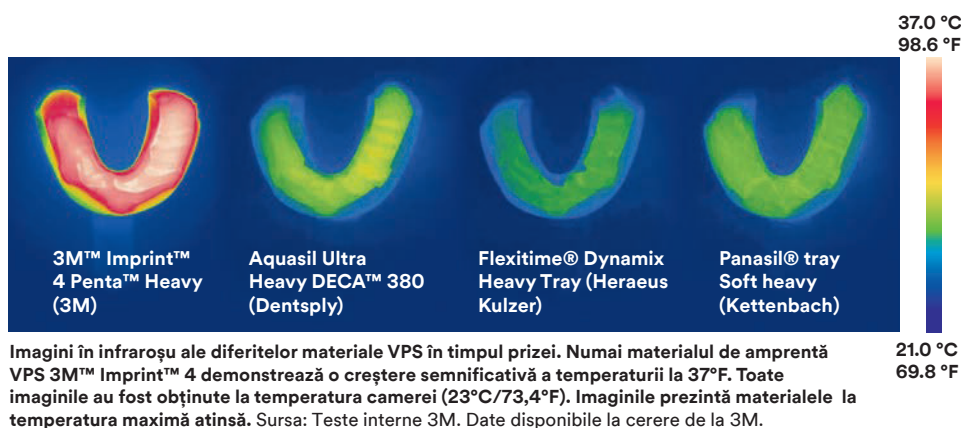

## Puteți să dispuneți de tot timpul de lucru necesar și să alegeți timpul de priză pe care îl doriți.

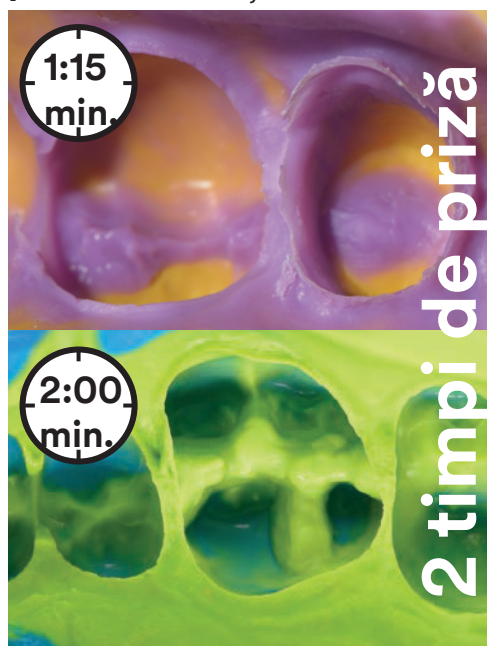

### Materiale cu priză extrarapidă Super Quick

- Soluția ideală pentru a amprenta 1 sau 2 unități preparate
- **Timp de lucru\*** până la 1:15 minute
- **Timp de injectare în jurul** preparației până la 35 secunde

### Materiale cu priză normală Regular Set

- Obțineți și mai mult timp de lucru, util în special pentru cazurile extinse
- **Timp de lucru\*** până la 2:00 minute
- **Timp de injectare în jurul** preparației până la 1:00 minut

\***TIMPUL DE LUCRU** include mixarea și manipularea la 23°C/73°F.

**TIMPUL DE PRIZĂ** indicat reprezintă timpul de priză intraorală care începe de la momentul inserării lingurii de amprentă în gură. Nu este necesar să adăugați timpul de lucru neutilizat. Așezați lingura pe câmpul protetic și apoi porniți cronometrul (1:15 pentru materialul Super Quick Set sau 2:00 pentru materialul Regular Set).

Materiale de  
lingură

| Produs                                                                      | Sistem de dozare                                                                                                                                                    | Vâscozitate<br>Mică  Mare | Tip de priză  | Timp maxim de lucru<br>(23°C/73°F)<br> | Timp de injectare intraorală<br>(37°C/98°F)<br> | Timp de priză intraorală<br>(37°C/98°F)<br> |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3M™ Imprint™ 4 Penta™ Putty                                                 |                                                                                    | Chitos                                                                                                     | Priză normală | 1:30                                                                                                                      | —                                                                                                                                  | 2:30                                                                                                                           |
| 3M™ Imprint™ 4 Penta™ Heavy<br>3M™ Imprint™ 4 Heavy                         |   | Vâscozitate ridicată                                                                                       | Priză normală | 2:00                                                                                                                      | —                                                                                                                                  | 2:00                                                                                                                           |
| 3M™ Imprint™ 4 Penta™ Super Quick Heavy<br>3M™ Imprint™ 4 Super Quick Heavy |   | Vâscozitate ridicată                                                                                       | Priză rapidă  | 1:15                                                                                                                      | —                                                                                                                                  | 1:15                                                                                                                           |

Materiale de  
spălare

|                                    |                                                                                   |                                                                                   |               |   |      |      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|------|------|
| 3M™ Imprint™ 4 Light               |  |  | Priză normală | — | 1:00 | 2:00 |
| 3M™ Imprint™ 4 Super Quick Light   |  |  | Priză rapidă  | — | 0:35 | 1:15 |
| 3M™ Imprint™ 4 Regular             |  |  | Priză normală | — | 1:00 | 2:00 |
| 3M™ Imprint™ 4 Super Quick Regular |  |  | Priză rapidă  | — | 0:35 | 1:15 |

## Informații pentru comandă

| Nr. produs                                                                                                                | Informații despre produs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kituri Intro</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71494                                                                                                                     | <b>3M™ Imprint™ 4 Penta™ Heavy Intro Kit</b><br>Kitul include: 1 – pastă de bază 300ml; 1 – catalizator 60ml; 1 – cartuș Light 50ml; 1 – cartuș Regular 50ml; 1 – cartuș Penta™; 10 – vârfuri mixare Penta™, roșu; 5 – seringi intraorale 3M™, verde; 5 – vârfuri mixare, galben; 5 – vârfuri intraorale, galben; 1 – adeziv VPS pentru lingurile de amprentă                                     |
| 71495                                                                                                                     | <b>3M™ Imprint™ 4 Penta™ Super Quick Heavy Intro Kit</b><br>Kitul include: 1 – pastă de bază 300ml; 1 – catalizator 60ml; 1 – cartuș Super Quick Light 50ml; 1 – cartuș Super Quick Regular 50ml; 1 – cartuș Penta™; 10 – vârfuri mixare Penta™, roșu; 5 – seringi intraorale 3M™, verde; 5 – vârfuri mixare, galben; 5 – vârfuri intraorale, galben; 1 – adeziv VPS pentru lingurile de amprentă |
| 71536                                                                                                                     | <b>3M™ Imprint™ 4 Penta™ Putty Intro Kit</b><br>Kitul include: 1 – pastă de bază 300ml; 1 – catalizator 60ml; 1 – cartuș Super Quick Light 50ml; 1 – cartuș Regular 50ml; 1 – cartuș Penta™; 10 – vârfuri mixare Penta™, roșu; 5 – seringi intraorale 3M™, verde; 5 – vârfuri mixare, galben; 5 – vârfuri intraorale, galben; 1 – adeziv VPS pentru lingurile de amprentă                         |
| 71534                                                                                                                     | <b>3M™ Imprint™ 4 Intro Kit</b><br>Kitul include: 2 – cartușe Heavy 50ml; 1 – cartuș Light 50ml; 1 – cartuș Regular 50ml; 10 – vârfuri mixare, verde; 10 – seringi intraorale 3M™, verde; 1 – adeziv VPS pentru lingurile de amprentă                                                                                                                                                             |
| 71535                                                                                                                     | <b>3M™ Imprint™ 4 Super Quick Intro Kit</b><br>Kitul include: 2 – cartușe Super Quick Heavy 50ml; 1 – cartuș Super Quick Light 50ml; 1 – cartuș Super Quick Regular 50ml; 10 – vârfuri mixare, verde; 10 – seringi intraorale 3M™, verde; 1 – adeziv VPS pentru lingurile de amprentă                                                                                                             |
| <b>Refill-uri 3M™ Penta™—materiale de amprentă</b> Fiecare refill include: 2 – paste de bază 300ml; 2 – catalizatori 60ml |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71484                                                                                                                     | 3M™ Imprint™ 4 Penta™ Heavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71485                                                                                                                     | 3M™ Imprint™ 4 Penta™ Super Quick Heavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71486                                                                                                                     | 3M™ Imprint™ 4 Penta™ Putty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Refill-uri—materiale de amprentă</b> Fiecare refill include: 4 – cartușe 50ml; 10 – vârfuri de mixare, verde           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71492                                                                                                                     | 3M™ Imprint™ 4 Heavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71493                                                                                                                     | 3M™ Imprint™ 4 Super Quick Heavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Nr. produs                                                                                                                                    | Informații despre produs                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Pachete economice—materiale de amprentă</b><br>Fiecare pachet economic include: 10 – cartușe 50ml                                          |                                                    |
| 71531                                                                                                                                         | 3M™ Imprint™ 4 Heavy Economy Pack                  |
| 71532                                                                                                                                         | 3M™ Imprint™ 4 Super Quick Heavy Economy Pack      |
| <b>Refill-uri—Materiale wash</b><br>Fiecare refill include: 4 – cartușe 50 ml; 5 – vârfuri mixare, galbene; 5 – seringi intraorale 3M™, verde |                                                    |
| 71488                                                                                                                                         | 3M™ Imprint™ 4 Light                               |
| 71487                                                                                                                                         | 3M™ Imprint™ 4 Regular                             |
| 71490                                                                                                                                         | 3M™ Imprint™ 4 Super Quick Light                   |
| 71489                                                                                                                                         | 3M™ Imprint™ 4 Super Quick Regular                 |
| <b>Cartușe pentru unitatea de mixare automată 3M™ Pentamix™ 3</b>                                                                             |                                                    |
| 77784                                                                                                                                         | 3M™ Imprint™ 4 Heavy                               |
| 77785                                                                                                                                         | 3M™ Imprint™ 4 Super Quick Heavy                   |
| 77786                                                                                                                                         | 3M™ Imprint™ 4 Penta™ Putty                        |
| <b>Cartușe pentru unitatea de mixare automată 3M™ Pentamix™ 2</b>                                                                             |                                                    |
| 76994                                                                                                                                         | Universal 3M™ Penta™ Cartridge                     |
| <b>Accesorii (inclus: 50 – vârfuri sau seringi)</b>                                                                                           |                                                    |
| 77949                                                                                                                                         | Vârfuri mixare 3M™ Penta™ – roșu                   |
| 71452                                                                                                                                         | Vârfuri mixare VPS 3M™ Garant™ – galben            |
| 71462                                                                                                                                         | Vârfuri mixare intraorale VPS 3M™ Garant™ – galben |
| 71450                                                                                                                                         | Vârfuri mixare VPS 3M™ Garant™ – verde             |
| 71506                                                                                                                                         | Seringă intraorală 3M™ – verde                     |



3M România, Bucharest Business Park,  
Corp D, Et.3, Str. Menuetului nr. 12, București, Sector 1  
Tel. (021) 202 8000  
Fax (021) 317 3184  
Email innovation.ro@mmm.com  
Web 3M.com/ro

3M, Garant, Imprint, Penta și Pentamix sunt mărci comerciale ale 3M sau 3M Deutschland GmbH. Utilizate sub licență în Canada. Vă rugăm să reciclați. © 3M 2018. Toate drepturile rezervate.  
70-2013-0581-3 (Rev. 8/2016)