



Compozite fluide care merg înainte acolo unde altele se opresc



Seringă



Fixarea dinților mobili



Cavități ce necesită
Minimă Intervenție



Restaurări directe ale cavităților de clasa I, II, III, IV, V



Dr. J. Tapiá Guadix,
Spania



Dr. M. Miyazaki,
Japonia



Seringă



Liner



Restaurarea
defectelor mici



Sigilarea fisurilor



Blocarea pragurilor



Restaurări tunel



Dr. J. Sabbagh,
Belgia

Descoperiți gama compozitelor fluide **G-ænial**



G-ænial Universal Flo

1 x 3.4 g (2 ml), 10 vârfuri de dozare, 1 capac de protecție
Disponibil în 15 nuanțe: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO3, BW, CV, JE, AE

G-ænial Flo

1 x 3.8 g (2 ml), 10 vârfuri de dozare, 1 capac de protecție
Disponibil în 8 nuanțe: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3, CV

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Romania
BD. N. Balcescu, nr. 5C
bl. Dunarea 1, ap. 57, se ct. 1
RO - Bucuresti
Tel. +40.21.315.93.15
Fax. +40.21.315.93.15
romania@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com



z O L F RO 8 67 11/10

Creați æ-moție
cu compozitele fluide de la **GC.**
G-ænial Flo & Universal Flo

Manipularea unui compozit fluid - Performanța unui
material de restaurare.




Compozitele fluide G-ænial

Următoarea Generație

Căutați un compozit fluid cu multiple indicații ale cărei cerințe cheie sunt manipularea optimă, rezistența îndelungată și o estetică ideală? Răspunsul este G-ænial Flo și Universal Flo.


Încă de la prima apariție pe piață, în 1995, utilizarea compozitelor fluide a crescut rapid. Utilizatorii au apreciat avantajele dozării ușoare și aplicării omogene, caracteristici determinate în principal de reducerea cantității de umplutură încorporată în aceste compozite.

Din păcate, foarte curând a devenit evident faptul că reducerea cantității de umplutură a determinat de asemenea și reducerea proprietăților fizice și mecanice ale materialului, limitând astfel numărul indicațiilor recomandate.

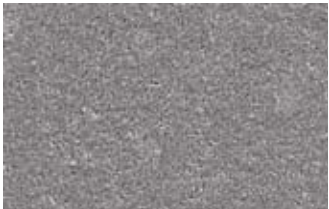

G-ænial Universal Flo

GC a căutat o soluție și a creat G-ænial Flo și G-ænial Universal Flo; două materiale cu o tehnologie unică a umpluturii. Spre deosebire de alte compozite fluide ele prezintă o greutate sporită și o dispersie omogenă a umpluturii.

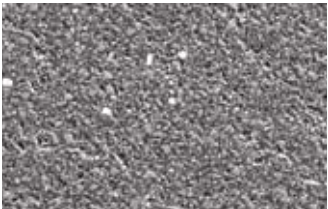

G-ænial Flo


GC R&D Date interne

Proprietățile fizice sunt identice cu cele ale unui compozit obișnuit, oferind posibilitatea utilizării în cazul unui număr mai mare de indicații comparativ cu compozitele fluide standard.

Dozare economică & ergonomică

Ambele produse vă sunt oferite într-o seringă cu un design special care oferă:

- O soluție ergonomică: produsul este dozat ușor în timp ce mărimea seringii este adaptată pentru o manipulare confortabilă.
- O aplicare simplă: suprafața vârfului este texturată astfel încât pasta nu rămâne lipită de el.
- Un avantaj economic: cantitatea de pastă reziduală din seringă este minimă: mai puțin de 0.04 ml.

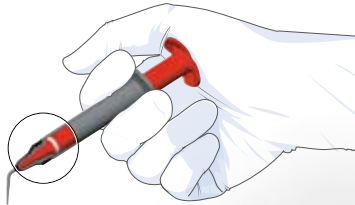

G-ænial Universal Flo

Fluiditate - rezistență ridicată și luciu

G-ænial Universal Flo oferă o combinație exclusivă între vâscozitatea fluidă, pentru o aplicare ușoară și convenabilă, și proprietățile fizice excepționale pentru o restaurare sigură, de lungă durată.


G-ænial Universal Flo poate fi utilizat pentru:

- Restaurări directe ale tuturor cavităților de clasa I, II, III, IV și V
- Cavități ce necesită Minimă Intervenție
- Fixarea dinților mobili


G-ænial Universal Flo oferă o serie de soluții inteligente și convenabile care depășesc posibilitățile compozitelor fluide standard aflate pe piață:

Longevitate și durabilitate

Una din principalele probleme cu care se confruntă medicii stomatologi atunci când utilizează un compozit fluid o reprezintă longevitatea și performanța materialului. G-ænial Universal Flo demonstrează performanța fizică a unui compozit obișnuit având însă o consistență fluidă. Acest lucru este posibil datorită designului, volumului și dispersiei compoziției.

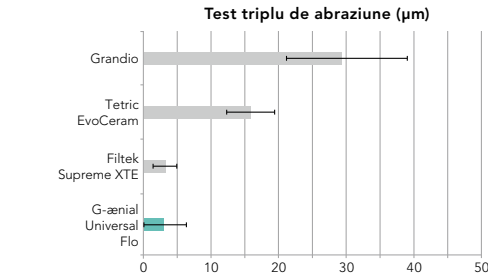

GC R&D Date interne, detaliile testelor sunt disponibile la cerere.

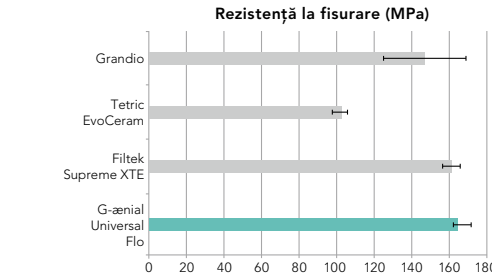

GC R&D Date interne, detaliile testelor sunt disponibile la cerere. Test realizat în conformitate cu ISO 4049:2000.

Fluiditate și aplicare

Vâscozitatea lui G-ænial Universal Flo este foarte atent echilibrată pentru a vă oferi un material cu o fluiditate omogenă care facilitează aplicarea simplă în cavitate. Și în același timp materialul este tixotrop, nu curge și nu își modifică poziția și nici forma.



G-ænial Universal Flo



Gradul de luciu al unui compozit nefinisat. Mostra din partea stângă este G-ænial Universal Flo

În afară de toate aceste beneficii, G-ænial Universal Flo oferă o estetică invizibilă superbă fără compromisuri. Datorită gamei largi de culori care include 15 nuanțe și 3 grade diferite de translucență, puteți obține restaurări estetice într-un mod simplu și rapid.

G-ænial Flo

Fluiditate - adaptare perfectă și radioopacitate ridicată

G-ænial Flo este un compozit fluid ușor de utilizat, radioopac, ce încorporează toate caracteristicile necesare pentru obținerea unor rezultate clinice optime:

- Ca liner sau pentru blocarea pragurilor
- În cazul preparațiilor tunel
- Pentru restaurarea defectelor mici
- Sigilarea fisurilor

G-ænial Flo oferă o soluție inteligentă și convenabilă la problemele compozitelor fluide tradiționale:

Hidrofilitate și fluiditate

Problema oricărui medic stomatolog la aplicarea primului strat de compozit o reprezintă hidrofilitatea materialului și adaptarea la pereții cavității. G-ænial Flo permite o aplicare ușoară și fluidă. Materialul beneficiază de o hidrofilitate ridicată, fapt ce determină o adaptare perfectă la pereții cavității, evitându-se încorporarea aerului.



G-ænial Flo

Restaurare fără liner: risc de încorporare a aerului



Restaurare cu liner: adaptare perfectă



Radioopacitate


Radioopacitatea lui G-ænial Flo este de aproximativ 230% Al, mai ridicată decât cea a smalțului, astfel încât materialul este ușor de diferențiat de structura dintelui oferind posibilitatea unui control radiologic ușor.

Siguranță


Proprietăți fizice bine echilibrate care sunt perfect adaptate la indicațiile produsului.

G-ænial Flo completează gama oferind 8 nuanțe inclusiv 2 nuanțe de opac.

G-ænial Flo este un partener ideal pentru G-ænial Anterior & Posterior.

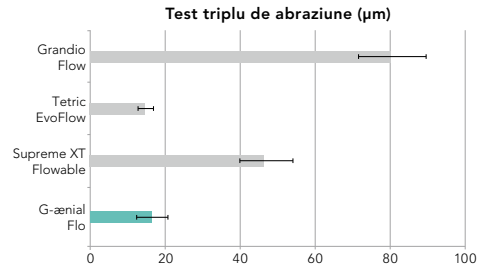

GC R&D Date interne, detaliile testelor sunt disponibile la cerere.

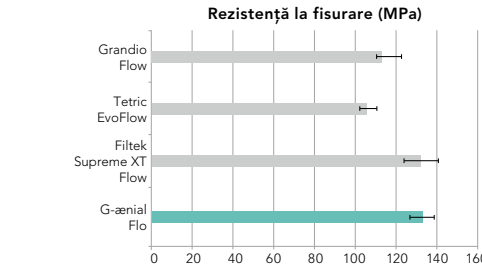

GC R&D Date interne, detaliile testelor sunt disponibile la cerere. Test realizat în conformitate cu ISO 4049:2000.

