

KaVo K5plus.

Manejable, ágil y además con mucha fuerza.


Gran rendimiento envuelto en dimensiones reducidas – esto es el K5plus.

El nuevo motor con un elevado torque mantiene las revoluciones constantes en todo el campo de revoluciones desde 1.000 hasta 30.000 min⁻¹ y se caracteriza por su suavidad de marcha extraordinaria – una condición ideal para sus exigencias respecto a la alta calidad de trabajo.

Con un peso de tan solo 200 gramos el K5plus es además un verdadero peso ligero. Esto facilita, junto con la forma ergonómica de la funda, el nuevo cable especialmente fino y el ruido de marcha apenas perceptible, un trabajo realmente agradable y un manejo cómodo.

El mantenimiento del K5plus se realiza – gracias al innovador "OSS" One-Shaft-System, sencillamente en el laboratorio, sin envíos y ni pérdidas de horas de trabajo.

KaVo K5plus. Como sucesor del eficaz KaVo K4 tiene ahora aún más ventajas.

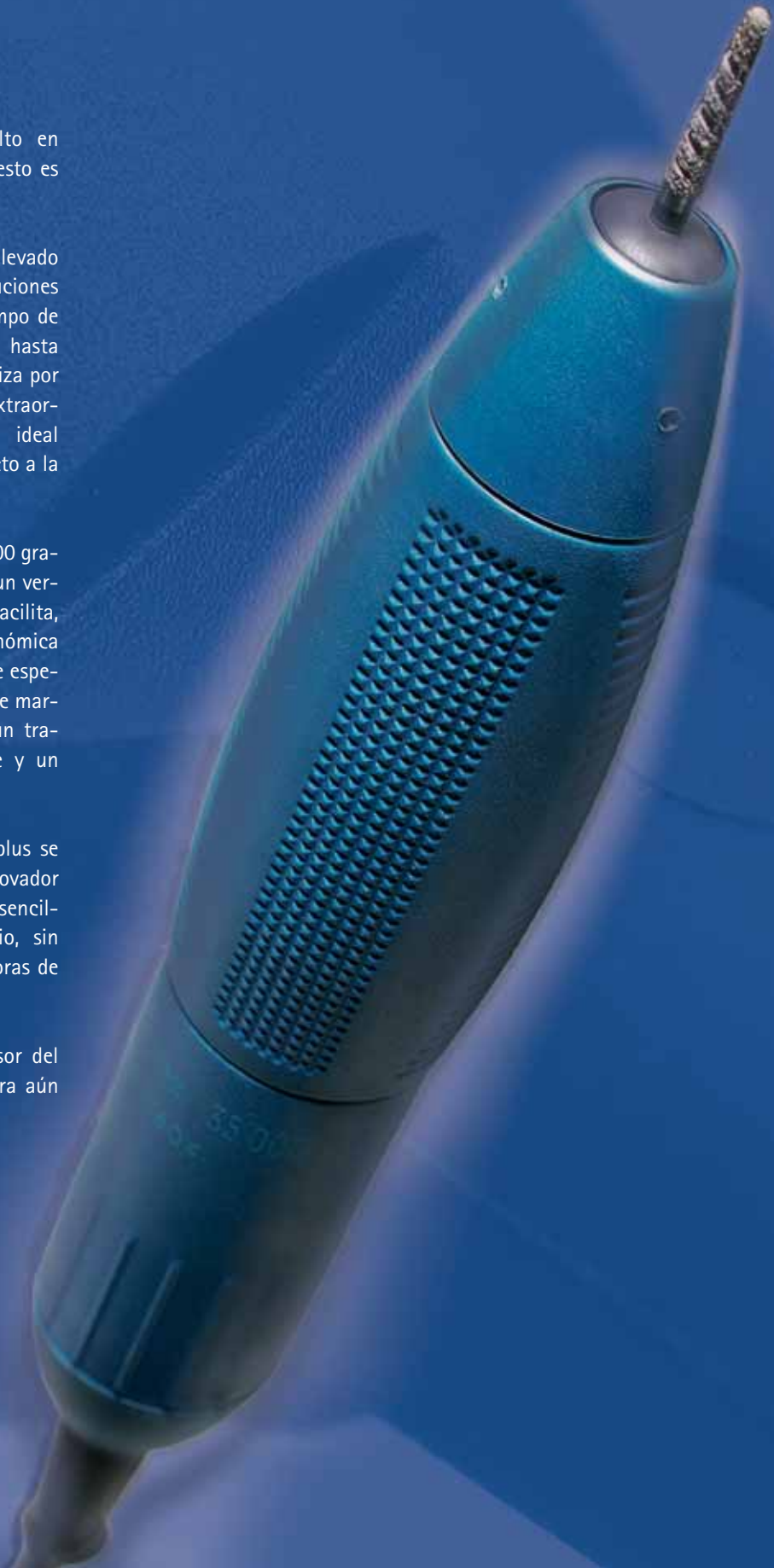


Lista para el servicio y a la vez rápidamente a mano: El K5plus en el soporte de mesa que ahorra espacio.

Sólo un aparato de control para casi todas las piezas de mano de KaVo. También por eso, el K-Control es, con toda la seguridad, una buena inversión.



No. de mat.: 1.001.6733
Campo de revoluciones: 1.000-35.000 min⁻¹
Torque máximo: 4,5 Ncm
Pinza de sujeción para el vástago: 2,35 mm, 3,00 mm, 1/8" ø
Desviación de marcha circular: 0,02 mm
Ventilador: sin refrigeración adicional
Sistema de propulsión: Motor DC sin colectores
Forma de la funda: Forma ergonómica adaptada a la mano

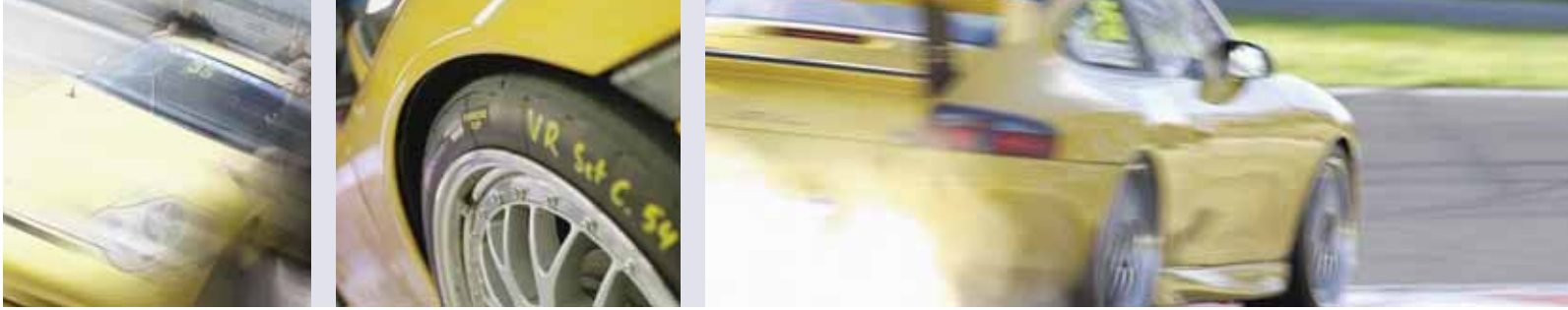

La unidad de control adaptada perfectamente a su K5plus: K-Control. Elija Vd. entre las tres versiones prácticas: Unidad de control sobremesa, por rodilla o pie.



Los otros micromotores de KaVo en la "parrilla de salida".

KaVo K5plus.
La elegancia no está reñida con la técnica.



Mat.-Nr. 1.xxx.xxx 06/03/05 Se reserva el derecho a modificaciones técnicas. Ligeros diferencias respecto a los colores se deben a la impresión. © Copyright KaVo Dental GmbH.

KaVo K5plus



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH · D 88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com

KaVo K5plus

Potencia en una
forma especialmente
atractiva.



KaVo. Dental Excellence.

