

A-SILICONE IMPRESSION MATERIAL



A SMALL STEP FOR DENTISTS
A GREAT STEP FOR DENTISTRY

PRESIDENT
CLASSIC SINCE 1975



PRESIDENT
The Original

 **COLTENE**

A SMALL STEP FOR DENTISTS A GREAT STEP FOR DENTISTRY



**MIT DER MARKTEINFÜHRUNG VON
PRESIDENT IM JAHR 1975 – DEM
ERSTEN A-SILIKON AUF DEM MARKT
– WURDE EIN MEILENSTEIN BEI DER
ENTWICKLUNG HOCHPRÄZISER
DENTALER ABFORMMATERIALIEN
GESCHAFFEN.**

Durch die erstmalige Verwendung von Polyvinylsiloxan- (PVS-)Elastomeren erreichten PRESIDENT Anwender eine noch nie dagewesene Dimensionsstabilität und Präzision, welche noch heute ein A-Silikon charakterisiert. Die Marke PRESIDENT überzeugt auch nach 40 Jahren noch mit ihrer souveränen Qualität.



LÖFFELMATERIALIEN

Die klassischen PRESIDENT Löffelmaterialien besitzen eine **sehr hohe Reißfestigkeit** und **Elastizität**. Dank einwandfreier Entnahme der Abformung wird selbst unter schwierigsten Bedingungen eine sehr hohe Präzision erreicht. PRESIDENT heavy body ist **oberflächenaktiviert** und besitzt **thixotrope** Eigenschaften. Mit seinem schnellen Druckaufbau wird dafür gesorgt, dass Korrekturmaterialien schnell und einfach in die klinisch relevanten Zonen vordringen können. PRESIDENT putties lassen sich einfach durchmischen und werden in zwei Endhärten sowie einer fast-Version angeboten.




KORREKTURMATERIALIEN

Die klassischen PRESIDENT Korrekturmaterialien sind stabil und unter Druck besonders fließfähig. Damit können selbst kleinste Details sauber erfasst werden. Die **oberflächenaktivierten** und **hydrophilen** Eigenschaften werden durch spezielle Tenside im Material hervorgerufen. In Kontakt mit Feuchtigkeit gelangen diese Tenside an die Oberfläche und verringern die Oberflächenspannung. Dies führt zu einer sehr **guten Benetzbarkeit**.



Das PRESIDENT Portfolio zeigt im Vergleich zu Mitbewerbern die höchste Reißfestigkeit, die für großartige Präzision und Dimensionsstabilität verantwortlich ist.

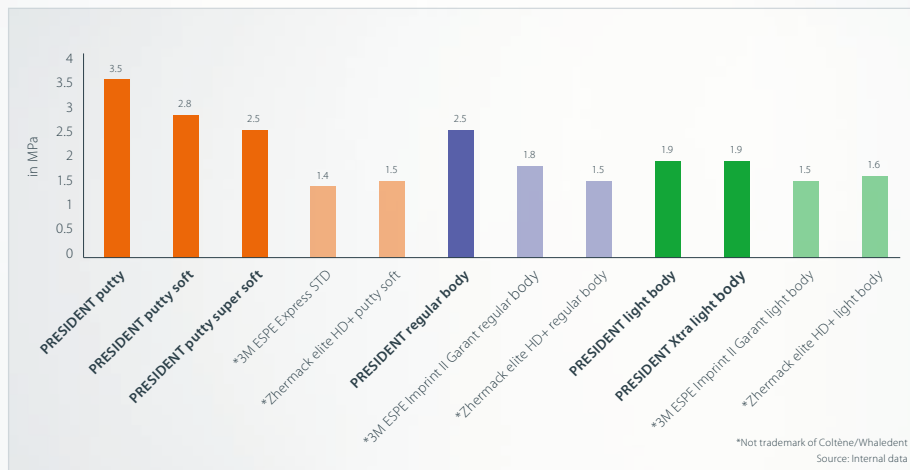

REISSFESTIGKEIT

40 JAHRE QUALITÄT & LOYALITÄT

Seit 40 Jahren sind Zahnärzte von der Marke PRESIDENT überzeugt. Die Loyalität gegenüber PRESIDENT zeigt, dass wir unser Qualitätsversprechen während der gesamten Zeit gehalten haben.

Nach 40 Jahren ist unser erstgeborenes A-Silikon-Kind nun erwachsen geworden. Aus diesem Anlass hält COLTENE ein spezielles Geschenk für alle bestehenden und potenziellen Kunden bereit:



NEU

putty super soft



NEU

Xtra light body

BESTELLINFORMATIONEN



microSystem 25 ml

- 60019932** **PRESIDENT The Original Xtra light body** **NEU**
4 × 25 ml Kartusche
12 × Universal Mixing Tips
- 6002** **PRESIDENT light body**
4 × 25 ml Kartusche
12 × Universal Mixing Tips
- 6005** **PRESIDENT light body**
20 × 25 ml Kartusche
- 6012** **PRESIDENT regular body**
4 × 25 ml Kartusche
12 × Universal Mixing Tips
- 6015** **PRESIDENT regular body**
20 × 25 ml Kartusche

50 ml

- 60019937** **PRESIDENT The Original Xtra light body** **NEU**
2 × 50 ml Kartusche
12 × Universal Mixing Tips
- 4626** **PRESIDENT light body**
2 × 50 ml Kartusche
12 × Universal Mixing Tips
- 4627** **PRESIDENT regular body**
2 × 50 ml Kartusche
12 × Universal Mixing Tips

75 ml

- 6712** **PRESIDENT heavy body**
2 × 75 ml Kartusche
8 × Mixing Tips Türkis
- 6715** **PRESIDENT heavy body**
20 × 75 ml Kartusche

putty

- 4617** **PRESIDENT putty**
2 × 300 ml
2 × Löffel
- 4843** **PRESIDENT putty soft**
2 × 300 ml
2 × Löffel
- 4632** **PRESIDENT fast putty soft**
2 × 300 ml
2 × Löffel
- 60019944** **PRESIDENT The Original putty super soft** **NEU**
2 × 300 ml
2 × Löffel

System 360

- 6100** **PRESIDENT heavy body Starter Kit**
1 × 380 ml Kartusche
10 × Dynamische Mixing Tips
1 × Fixation Ring
- 6105** **PRESIDENT heavy body Refill**
2 × 380 ml Kartusche


Tuben

- 4667** **PRESIDENT light body**
1 × 53 ml Base
1 × 53 ml Catalyst
- 4717** **PRESIDENT regular body**
1 × 53 ml Base
1 × 53 ml Catalyst
- 4767** **PRESIDENT heavy body**
1 × 53 ml Base
1 × 53 ml Catalyst



40 JAHRE ERFAHRUNG

40 Jahre PRESIDENT bedeutet 14.600 Tage zufriedene Zahnärzte. Unser erstes A-Silikon war in den Jahren stets ein treuer Begleiter. COLTENE möchte sich für die Treue bedanken und die Gelegenheit nutzen, eine zusätzliche, erneuerte PRESIDENT Linie vorzustellen:

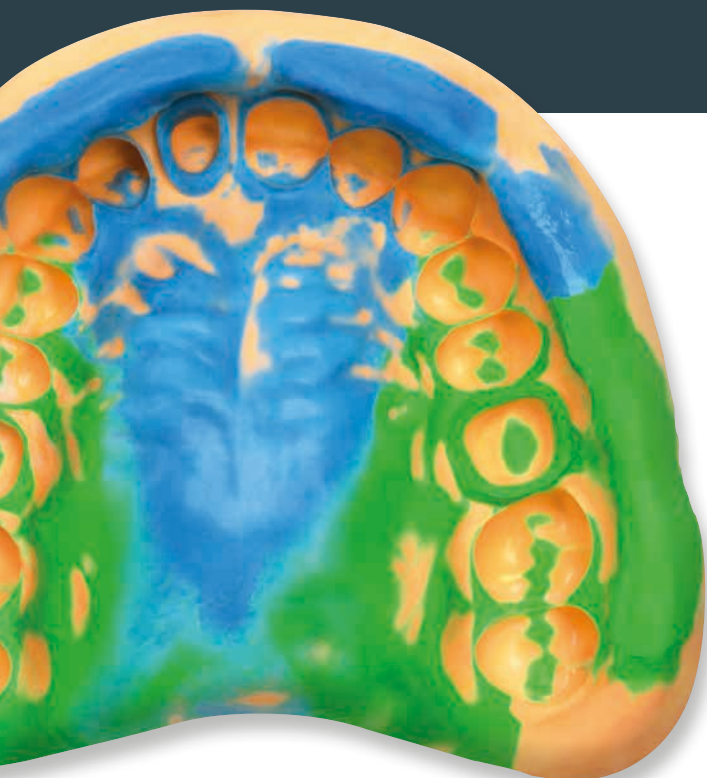

PRESIDENT

The Original


PRESIDENT

The Original

WAS IST NEU?


NEUE FARBEN

Die neuen und frischen Farben der modernisierten PRESIDENT Linie zeigen einen besseren Kontrast zwischen Korrektur- und Löffelmaterialien. Dadurch können Details noch besser erkannt werden.

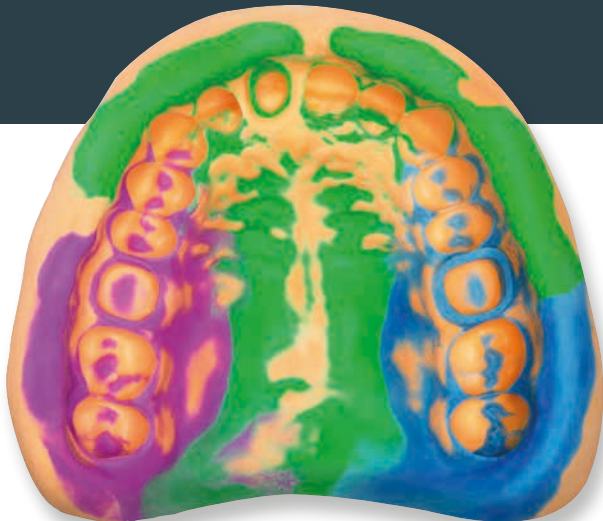

NEUE LÖFFELMATERIALIEN

Neben den gewohnten Löffelmaterialien heavy body, putty und putty soft enthält die neue PRESIDENT Linie zwei zusätzliche Viskositäten: **MonoBody** und **putty super soft**. Mit der Sortimentserweiterung durch MonoBody ist nun auch das richtige Material für Implantatabformungen verfügbar. Das neue putty super soft ist außerdem leicht zu durchmischen.

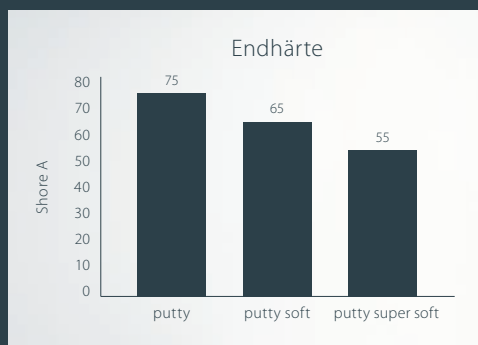

Egal welches Material - Sie treffen immer die richtige Wahl. PRESIDENT heavy body hat eine hochvisköse Konsistenz welche perfekt zum neuen Xtra light body passt. Das weniger elastische putty ist das bevorzugte Material für die Korrekturabformtechnik, bei der ein Stempeldruck gewünscht ist. Bei schwierigen Mundsituationen wird putty soft oder putty super soft empfohlen. Die verschiedenen Endhärten bieten optimale Stabilität und einfaches Beschneiden.

NEUE KORREKTURMATERIALIEN

Das neue Sortiment der Korrekturmaterialien beinhaltet neben light body und regular body auch das neue **Xtra light body**. Wie der Name bereits verrät, ist Xtra light body ein sehr dünnflüssiges Material, welches auch kleinste marginale Details erfassen kann.



PRESIDENT

The Original



Xtra light body




light body



regular body

PRESIDENT Korrekturmaterialien zeigen perfekte Fließeigenschaften im feuchten Milieu, welche Luft einschließen verhindern und präzise Konturen verleihen.

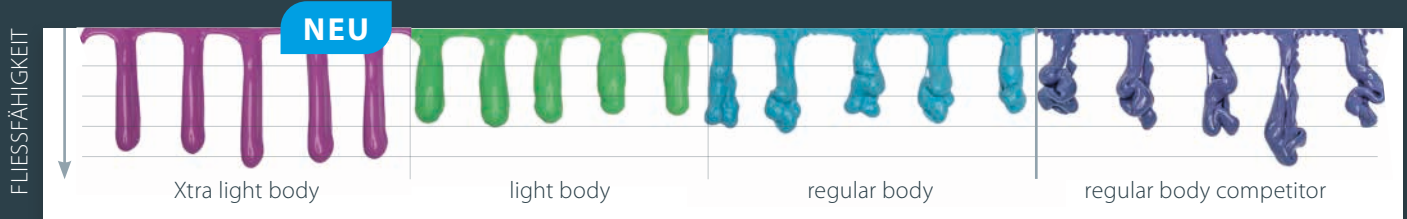

		Fließfähigkeit	Viskosität	Endhärte	Reißfestigkeit	Rückstellvermögen
Korrekturmaterial	Xtra light body			50 Shore A	1,9 MPa	99,8 %
	light body			50 Shore A	1,9 MPa	99,8 %
	regular body			55 Shore A	2,5 MPa	99,8 %
	MonoBody			58 Shore A	3,0 MPa	99,7 %
Löffelmaterial	heavy body			63 Shore A	3,5 MPa	99,7 %
	putty super soft			55 Shore A	2,5 MPa	99,5 %
	putty soft			65 Shore A	2,8 MPa	99,4 %
	putty			75 Shore A	3,5 MPa	99,2 %

DAS PRESIDENT PORTFOLIO AUF EINEN BLICK

BESTELLINFORMATIONEN

microSystem 25 ml

- 60019932** **PRESIDENT** The Original **Xtra light body**
4 × 25 ml Kartusche
12 × Universal Mixing Tips
- 60019933** **PRESIDENT** The Original **light body**
4 × 25 ml Kartusche
12 × Universal Mixing Tips
- 60019934** **PRESIDENT** The Original **light body**
20 × 25 ml Kartusche
- 60019935** **PRESIDENT** The Original **regular body**
4 × 25 ml Kartusche
12 × Universal Mixing Tips
- 60019936** **PRESIDENT** The Original **regular body**
20 × 25 ml Kartusche

50 ml

- 60019937** **PRESIDENT** The Original **Xtra light body**
2 × 50 ml Kartusche
12 × Universal Mixing Tips
- 60019938** **PRESIDENT** The Original **light body**
2 × 50 ml Kartusche
12 × Universal Mixing Tips
- 60019939** **PRESIDENT** The Original **regular body**
2 × 50 ml Kartusche
12 × Universal Mixing Tips
- 60019940** **PRESIDENT** The Original **heavy body**
2 × 50 ml Kartusche
6 × Mixing Tips Türkis

75 ml

- 60019941** **PRESIDENT** The Original **heavy body**
2 × 75 ml Kartusche
8 × Mixing Tips Türkis



putty

- 60019942** **PRESIDENT** The Original **putty**
2 × 300 ml
2 × Löffel
- 60019943** **PRESIDENT** The Original **putty soft**
2 × 300 ml
2 × Löffel
- 60019944** **PRESIDENT** The Original **putty super soft**
2 × 300 ml
2 × Löffel

System 360

- 60019945** **PRESIDENT** The Original **MonoBody Starter Kit**
1 × 380 ml Kartusche
10 × Dynamische Mixing Tips
1 × Fixation Ring
- 60019946** **PRESIDENT** The Original **MonoBody Refill**
2 × 380 ml Kartusche
- 60019947** **PRESIDENT** The Original **heavy body Starter Kit**
1 × 380 ml Kartusche
10 × Dynamische Mixing Tips
1 × Fixation Ring
- 60019948** **PRESIDENT** The Original **heavy body Refill**
2 × 380 ml Kartusche

Tuben

- 60019949** **PRESIDENT** The Original **light body**
1 × 53 ml Base
1 × 53 ml Catalyst
- 60019950** **PRESIDENT** The Original **regular body**
1 × 53 ml Base
1 × 53 ml Catalyst

PRESIDENT

The Original

ZUBEHÖR



PRESIDENT Abformlöffel

Löffel, transparent (12 Stk)

C6901	# 1 Large Upper
C6902	# 2 Large Lower
C6903	# 3 Medium Upper
C6904	# 4 Medium Lower
C6905	# 5 Small Upper
C6906	# 6 Small Lower
C6907	# 7 Quadrant UL/LR
C6908	# 8 Quadrant UR/LL
C6909	# 9 Anterior

Löffel, blau – autoklavierbar (12 Stk)

C6950	# 1 Large Upper
C6951	# 2 Large Lower
C6952	# 3 Medium Upper
C6953	# 4 Medium Lower
C6954	# 5 Small Upper
C6955	# 6 Small Lower
C6956	# 7 Quadrant UL/LR
C6957	# 8 Quadrant UR/LL
C6958	# 9 Anterior

microSystem 25 ml

6270	microSystem Dispenser
60019663	Universal Mixing Tips (40 Stk)
6210	Oral Tips White (100 Stk)
6555	Oral Tips Yellow (100 Stk)
6223	Spreader Tips (100 Stk)

50 ml

6900	Dispenser 50/75 ml
60019663	Universal Mixing Tips (40 Stk)
6555	Oral Tips Yellow (100 Stk)
6223	Spreader Tips (100 Stk)



75 ml

6900	Dispenser 50/75 ml
6958	Plunger 75 ml (für Dispenser 50 ml)
6552	Mixing Tips Türkis (40 Stk)

System 360

6162	Dynamische Mixing Tips (40 Stk)
6163	Fixation Ring

Weiteres Zubehör

4422	Coltopress (Tuben-Auspresshilfe)
4420	Ausschneidemesser
4410	Adhesive (10 ml)
4405	Adhesive autoklavierbar (10 ml)
4426	Abformspritzen inkl. 15 Tips (3 Stk)
4428	Refill Tips (50 Stk)
4412	Mischblock (1 Stk)
4414	Mischblöcke (10 Stk)
4415	Spatel

PRESIDENT
CLASSIC SINCE 1975



PRESIDENT
The Original

SIE HABEN DIE WAHL!



© 2016 Coltène/Whaledent AG - www.coltene.com

**Coltène/Whaledent
GmbH + Co.KG**
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten
Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls
Ohio 44223 / USA
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

 **COLTENE**